

# Στρώμα Νοσοκομειακό

## "PRO I"

Κωδ. 0805941

Διαστάσεις: 191 × 82 × 14cm

## "PRO II"

Κωδ. 0805942

Διαστάσεις: 195 × 90 × 14cm




Το στρώμα νοσοκομειακού τύπου έχει σχεδιαστεί με σκοπό την πρόληψη, τον περιορισμό και την καθυστέρηση του σχηματισμού ελκών κατάκλισης σε κατακλιμένους ασθενείς ή σε άτομα με πολύωρη παραμονή στο κρεβάτι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για νοσοκομειακή ή οικιακή χρήση.

### ΕΠΙΠΕΔΟ 1: ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ

2 ειδικά σχεδιασμένες ανατομικές ζώνες από 100% αφρό PU (πολυουρεθάνη), πυκνότητας 45Kg/m<sup>3</sup>

### ΕΠΙΠΕΔΟ 2: ΒΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

100% αφρός PU (πολυουρεθάνη), πυκνότητας 45Kg/m<sup>3</sup>

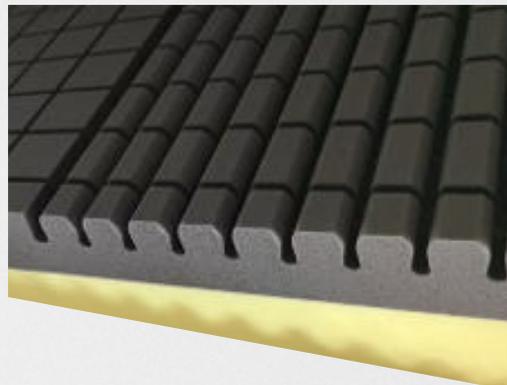

Κάλυμμα με φερμουάρ



Στρώμα 2 επιπέδων  
(εσωτερικά)

- Προσφέρει ομοιόμορφη κατανομή πίεσης στο σώμα ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία οιδήματος και ερεθισμών
- Ενδείκνυται για ασθενείς χαμηλού προς μεσαίου κινδύνου εμφάνισης έλκους κατάκλισης (Stage I to II), με την προϋπόθεση της συχνής αλλαγής θέσης των ασθενών, από το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης
- Από 100% αφρό PU (πολυουρεθάνη), πυκνότητας 45Kg/m<sup>3</sup> (εσωτερικά)
- Με κάλυμμα από 100% PU (πολυουρεθάνη)
- Με ανατομικές εύκαμπτες ζώνες που μειώνουν την άσκηση δυνάμεων στην κοιλιακή χώρα του ασθενούς
- Μέγιστο φορτίο: 250Kg
- Απαλότητα για μέγιστη προστασία των μαλακών ιστών
- Υψηλή άνεση και στήριξη του σώματος
- Διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος μέσω των ειδικών εγχοπών - καναλιών (channels) - ιδιότητες αναπνέοντος υλικού
- Εργονομικός σχεδιασμός - μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε κρεβάτια με πολύσπαστη λειτουργία ακολουθώντας τις κινήσεις του κρεβατιού
- Με κάλυμμα αδιάβροχο & αντιολισθητικό, με κολλημένες ραφές & κάλυμμα στο φερμουάρ για αποφυγή εισροής υγρών στο εσωτερικό
- Διαθέτει φερμουάρ 180°, για εύκολη αφαίρεση του καλύμματος
- Διαθέτει πλαστικό φερμουάρ και λαβές περιμετρικά του καλύμματος για εύκολη μεταφορά του ασθενούς στον μαγνητικό τομογράφο (MRI)
- Αντιμυκητιακό, Αντιμικροβιακό & Αντιβακτηριδιακό
- Κάλυμμα με ιδιότητες επιβράδυνσης φλόγας
- Το κάλυμμα είναι αφαιρούμενο, πλενόμενο στο πλυντήριο στους 80°C, με δυνατότητα εύκολης απολύμανσης

\*Ο κωδικός 0805942 ενδείκνυται για χρήση με το κρεβάτι 0805940 ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ "PRO"  
\*\*Ο κωδικός 0805941 ενδείκνυται για χρήση με το κρεβάτι 0805905 ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ

3έτη  
εγγύηση



www.mobiak.com



mobiakcaresales@mobiak.com | medicalexports@mobiak.com