



Κάλτσες
Διαβαθμισμένης
Συμπίεσης

SANYLEG[®]

ΚΑΝΤΣΕΩ

■ Αντιθρομβωτικές
Μετεγχειρητικές

■ Θεραπευτικές
Φλεβίτιδος

■ Πρόληψης

■ Αθλητικές
διαβαθμισμένης
συμπίεσης

Αντιθρομβωτικές Μετεγχειρητικές

Μια σειρά κάλτσες αφιερωμένη στην προφύλαξη από θρομβώσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επέμβαση. Προκειμένου να διασφαλιστεί η καλή εφαρμογή και η σωστή διαβάθμιση συμπίεσης, είναι κατασκευασμένες από απαλό και ελαστικό ύφασμα, υποαλλεργικό (χωρίς λάτεξ).



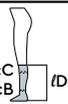
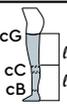
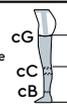
SANYLEG⁺

ΕΝΔΕΙΞΙΣ

- Πρόληψη θρομβώσεων που δημιουργούνται μετά από χειρουργική επέμβαση
- Θεραπεία που σχετίζεται με μετατραυματικές θεραπείες, μελανιές και οιδήματα σε κατακεκλιμένους ασθενείς
- Μώλωπες και υδροστατικά οιδήματα.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΙΣ

- Τοπική δερματίτιδα, ερύθημα, νέκρωση.
- Απογύμνωση, πνευμονικό οίδημα, μοσχεύματα.
- Αγγειακές διαταραχές καρδιακής προέλευσης.
- Πόδια μεγαλύτερης περιφέρειας.

18mm/Hg							
AD	AG	AGT					
1 Pair	1 Pair	1 Piece	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
							
LENGTH 35 - 45cm	LENGTH 63 - 88cm	LENGTH 63 - 88cm					
CIRCUMFERENCE		cB 18 - 20cm cC 28 - 40cm cG 42 - 58cm	cB 21 - 23cm cC 32 - 44cm cG 52 - 68cm	cB 24 - 26cm cC 36 - 48cm cG 62 - 78cm	cB 27 - 29cm cC 40 - 52cm cG 70 - 88cm	cB 30 - 32cm cC 44 - 56cm cG 73 - 98cm	
The color of the visual heel indicates the size of the stocking.							

**ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΚΑΛΤΣΑ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ
ΛΕΥΚΗ 18 - 20mmHG | H62**



ΜΕΓΕΘΟΣ

H62	S
	M
	L
	XL
	XXL

**ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΚΑΛΤΣΑ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ
ΛΕΥΚΗ 18 - 20mmHG | H61**



ΜΕΓΕΘΟΣ

H61	S
	M
	L
	XL
	XXL

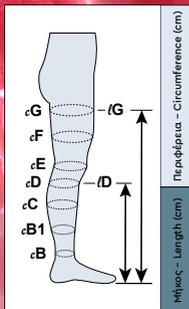
Θεραπευτικές Φλεβίτιδος

Η θεραπευτική σειρά της Sanyleg είναι κατασκευασμένη από τέτοιο τύπο υφάσματος που εξασφαλίζει μια «αδιαφανής» εμφάνιση.

Ο ειδικός αυτός τύπος υφάσματος διατηρεί τη μέγιστη ελαστικότητα ενώ παράλληλα εξασφαλίζει βέλτιστο αισθητικό σχέδιο.

Οι κάλτσες αυτές ενδείκνυνται ιδιαίτερα για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών όπως η φλεβική ανεπάρκεια και οι κίρσοι και διατίθενται σε εκδόσεις class I, class II ανοικτού δαχτύλου.

Συνιστάται να λάβετε ιατρική αξιολόγηση και συνταγή πριν χρησιμοποιήσετε αυτά τα προϊόντα



		X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
		1	2	3	4	5	6
.B		18 - 20	20 - 22	22 - 25	25 - 28	28 - 32	32 - 35
.B1		23 - 27	25 - 30	27 - 33	30 - 36	32 - 38	36 - 41
.C		30 - 36	32 - 40	34 - 44	38 - 48	41 - 51	45 - 54
.D		26 - 32	29 - 34	31 - 36	33 - 39	37 - 42	40 - 45
.E		32 - 38	34 - 41	37 - 44	40 - 49	42 - 51	44 - 55
.F		38 - 50	43 - 54	46 - 59	50 - 64	54 - 69	60 - 74
.G		38 - 53	43 - 58	46 - 62	50 - 67	54 - 73	60 - 78
/G	SHORT	62 - 71					
	STANDARD	72 - 83					
/D	SHORT	33 - 37					
	STANDARD	38 - 44					

**ΚΑΛΤΣΑ ΦΛΕΒΙΤΙΔΟΣ ΚΛΑΣΗ I
ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΝΟΙΧΤΑ
ΔΑΧΤΥΛΑ ΜΠΕΖ 18 - 21mmHG | T31**

ΜΕΓΕΘΟΣ

T31	S
	M
	L
	XL
	XXL



**ΚΑΛΤΣΑ ΦΛΕΒΙΤΙΔΟΣ ΚΛΑΣΗ II
ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΝΟΙΧΤΑ
ΔΑΧΤΥΛΑ ΜΠΕΖ 23 - 32mmHG | T41**

ΜΕΓΕΘΟΣ

T41	S
	M
	L
	XL
	XXL

**ΚΑΛΤΣΑ ΦΛΕΒΙΤΙΔΟΣ ΚΛΑΣΗ I
ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ
ΜΠΕΖ 18 - 21mmHG | T32**

ΜΕΓΕΘΟΣ

T32	S
	M
	L
	XL
	XXL



**ΚΑΛΤΣΑ ΦΛΕΒΙΤΙΔΟΣ ΚΛΑΣΗ II
ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ
ΜΠΕΖ 23 - 32mmHG | T42**

ΜΕΓΕΘΟΣ

T42	S
	M
	L
	XL
	XXL



**ΚΑΛΤΣΑ ΦΛΕΒΙΤΙΔΟΣ ΚΛΑΣΗ I
ΚΑΛΣΟΝ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ
ΜΠΕΖ 18 - 21mmHG | T33**

ΜΕΓΕΘΟΣ

T33	S
	M
	L
	XL
	XXL



**ΚΑΛΤΣΑ ΦΛΕΒΙΤΙΔΟΣ ΚΛΑΣΗ II
ΚΑΛΣΟΝ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ
ΜΠΕΖ 23 - 32mmHG | T43**

ΜΕΓΕΘΟΣ

T43	S
	M
	L
	XL
	XXL



Κάλτσες Πρόληψης

Διαφανή Γραμμή

Ειδικά σχεδιασμένες κάλτσες για γυναίκες που επιθυμούν ένα προϊόν συνδυάζει την άνεση και την υγεία των ποδιών τους, οι συγκεκριμένες κάλτσες συνδυάζουν λειτουργικότητα, άψογη εφαρμογή και διακριτική αισθητική.

Διατίθενται σε δύο επίπεδα συμπίεσης, διαθέτουν ανατομική φτέρνα, μανσέτα κατά της συρρίκνωσης και είναι φτιαγμένες από εξαιρετικά μαλακά, ποιοτικά υφάσματα, για τέλεια εφαρμογή και αίσθηση ευεξίας όλη την ημέρα.

* Συνιστάται να ζητήσετε τη γνώμη ιατρού πριν από τη χρήση.

ΚΑΛΤΣΑ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΠΕΖ/ΜΑΥΡΗ 70 DEN 10-14 mmHg | B11 Χαμηλού Βαθμού Συμπίεση

ΚΑΛΤΣΑ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΠΕΖ/ΜΑΥΡΗ 140 DEN 15-21 mmHg | P21 Μεσαίου Βαθμού Συμπίεση



Ιδανικό για όσους θα ήθελαν να ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα πρόληψης, αλλά ενδιαφέρονται κυρίως για την άνεση και την ευημερία που προσφέρουν οι ελαστικές κάλτσες συμπίεσης.

Shoe size	S-M	L-XL
European	35 - 38	39 - 42

Κάλτσες Πρόληψης Βαμβακερή Γραμμή



Οι κάλτσες μας είναι κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας μαλακό βαμβάκι, εμπλουτισμένο με ελαστικές ίνες που προσφέρουν ιδανική, βαθμιαία συμπίεση για σωστή κυκλοφορία και στήριξη.

Χάρη στο καινοτόμο λάστιχο υψηλής διαστολής, οι κάλτσες προσφέρουν άνετη εφαρμογή χωρίς πίεση, επιτρέποντας απόλυτη ελευθερία κινήσεων και αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

* Συνιστάται να ζητήσετε τη γνώμη ιατρού πριν από τη χρήση.

ΚΑΛΤΣΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΜΑΥΡΗ 14-16 mmHg | B12 Χαμηλού Βαθμού Συμπίεση

ΚΑΛΤΣΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΜΑΥΡΗ 15-21 mmHg | P22 Μεσαίου Βαθμού Συμπίεση



SANYLEGG

Shoe size	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
European	37 - 39	39 - 41	41 - 43	43 - 45	45 - 47

Αθλητικές διαβαθμισμένης συμπίεσης

Οι κάλτσες και τα ενδύματα συμπίεσης έχουν γίνει όλο και πιο δημοφιλή στον αθλητικό κλάδο και η γκάμα των προϊόντων με συμπίεση έχει εκτοξευτεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι φυσικό επακόλουθο του γεγονότος ότι οι κάλτσες συμπίεσης έχουν επιστημονικά αποδεδειγμένη θετική επίδραση κατά τη διάρκεια της άσκησης και μετά την άσκηση.

Η αθλητική συμπίεση έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια και πολλές διεθνείς εταιρείες έχουν πρωτοστατήσει κάνοντας την ιδέα της συμπίεσης γνωστή στους αθλητές.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ | SB22



	Size	European	US - Men	US - Women
SB22	S	37 - 39	5 - 6½	6½ - 8
	M	39 - 41	6½ - 8	8 - 10
	L	41 - 43	8 - 9½	10 & over
	XL	43 - 45	9½ - 11	-
	XXL	45 - 47	11 - 12½	-

ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η συμπίεση διασφαλίζει ότι οι μύες οξυγονώνονται, και τα πόδια αποτρέπονται από πρήξιμο. Δώστε στον εαυτό σας τις καλύτερες προϋποθέσεις για υψηλές επιδόσεις, ανεξάρτητα από το αν παίρνετε μέρος σε έναν αγώνα ή μια προπόνηση.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Φορώντας κάλτσες συμπίεσης κατά τη διάρκεια της σωματικής δραστηριότητας υποστηρίζονται οι μύες και μειώνονται οι κραδασμοί που προκαλούνται από μυϊκή κόπωση. Το υποστηρικτικό αποτέλεσμα μπορεί επίσης να αποτρέψει τους νάρθηκες κνήμης και τις μυϊκές κακώσεις.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Οι κάλτσες συμπίεσης σας βοηθούν να επιταχύνετε τη διαδικασία αποκατάστασης. Αυξημένη ροή του αίματος εξασφαλίζει ότι γαλακτικό οξύ και άλλες τοξίνες μεταφέρονται αποτελεσματικά από τους μύες. Μετά από αγώνα ή προπόνηση να φοράτε πάντα κάλτσες συμπίεσης δίνοντας στους μύες σας μια ευκαιρία να ανακάμψουν με τον καλύτερο τρόπο.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΛΤΣΑΣ

Αντιθρομβωτικές Μετεγχειρητικές Θεραπευτικές Φλεβίτιδος



1

Μετρήστε την περιφέρεια των σφυρών (αστράγαλοι), της κνήμης (γάμπα) καθώς και του μηρού.

Η τοποθέτηση γίνεται με τον ασθενή σε ξαπλωμένη θέση.

2



Για πιο εύκολη τοποθέτηση γυρίστε τις κάλτσες ανάποδα (τα μέσα έξω) αφήνοντας το τμήμα της κάλτσας από τη πτέρνα και μετά ως έχει.



3

Με τα δύο χέρια ανοίξτε την κάλτσα και βάλτε την στο πόδι του ασθενή μέχρι τη πτέρνα.

4



Γυρίστε την κάλτσα (τα έξω μέσα) καθώς την φοράτε στον ασθενή πάντα με την περιοχή της πτέρνας στη σωστή θέση.



5

Αφού φορεθεί προσέξτε να μην έχει ζάρες, όπου έχει τις λειαίνουμε τραβώντας το σημείο που βρίσκονται και όχι από την κορυφή της κάλτσας.

Τέλος σιγουρευτείτε ότι η οπή στο μπροστινό μέρος (δάκτυλα) είναι εύκολα προσβάσιμη σε περίπτωση επιθεώρησης από τον γιατρό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

- Οι κάλτσες πλένονται στο χέρι ή στο πλυντήριο με ουδέτερο απορρυπαντικό χωρίς μαλακτικό. Για πλύσιμο στο πλυντήριο τοποθετήστε τις μέσα σε μια μαξιλαροθήκη.
- Μην στύβετε.
- Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά, όπως χλωρίνη.
- Μην τις τοποθετείτε σε στεγνωτήριο, αφήστε τις να στεγνώσουν φυσικά σε σκιερό μέρος μακριά από τον ήλιο καθώς και από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας.
- Μην κάνετε στεγνό καθάρισμα.
- Μην σιδερώνετε.





www.mobiakcare.com

Επίσημος Συνεργάτης

